


Entretien quotidien de votre prothèse phonatoire - Provox Flush




Nettoyez la prothèse phonatoire matin et soir et après chaque repas à l'aide de la brosse Provox Brush et la poire de rinçage Provox Flush.

1. Utilisez la poire Provox Flush avec de l'eau potable ou de l'air. N'utilisez pas d'autres liquides que de l'eau.

Astuce : Utilisez le Flush d'abord avec de l'air. Continuez avec de l'eau quand vous vous sentez en confiance. Attention: Évitez que l'eau ne pénètre dans la trachée !

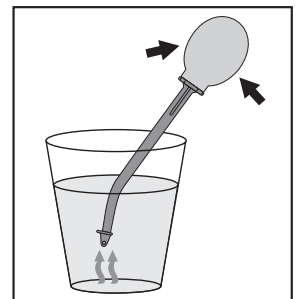

2. Placez l'extrémité pointue du Flush dans un verre d'eau et pressez la poire en silicone. En relâchant, l'eau sera aspirée dans la poire.
3. Insérez la pointe du Provox Flush dans la prothèse phonatoire. Assurez-vous qu'elle soit bien ajustée pour l'étanchéité. Tenez le Flush fermement avec votre main.

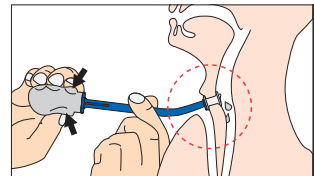

Astuce : la tige du Flush peut être pliée pour pouvoir atteindre plus facilement la prothèse phonatoire.

4. Utilisez votre autre main pour presser la poire. Propulsez doucement l'eau ou l'air dans la prothèse.
5. Inclinez la poire vers le haut et relâchez la pression. La poire se regonfle. Retirez le Flush de la prothèse phonatoire.
6. Détachez la poire de la tige. Nettoyez les deux parties à l'eau potable et au détergent, conformément au mode d'emploi du Provox Flush pour enlever tout le mucus séché ou les particules de nourriture. Laissez sécher à l'air.
7. Désinfectez quotidiennement le Flush, conformément au mode d'emploi du Provox Flush.

